

A hand is holding a blue, flexible catheter. The catheter has a multi-lobed, balloon-like tip. The background is a light blue gradient.

***iQ*CATH**


**... cel mai bun cateter urinar  
pe care îl puteți avea!**

Cateterizare intermitentă blândă,  
facilă și sigură.

# Cateterizare fără probleme

La bărbați uretra este de 18–25 cm lungime. Din cauza lungimii și a curbelor naturale ale uretrei masculine, introducerea unui cateter poate fi mai dificilă pentru bărbați, mai ales dacă există modificări fiziologice din cauza unei infecții, stricturi sau

cicatrici. În mod special în aceste cazuri IQ-Cath este eficient: vârful siliconic rotunjit și flexibil permite o cateterizare blândă și în condiții de maximă siguranță.

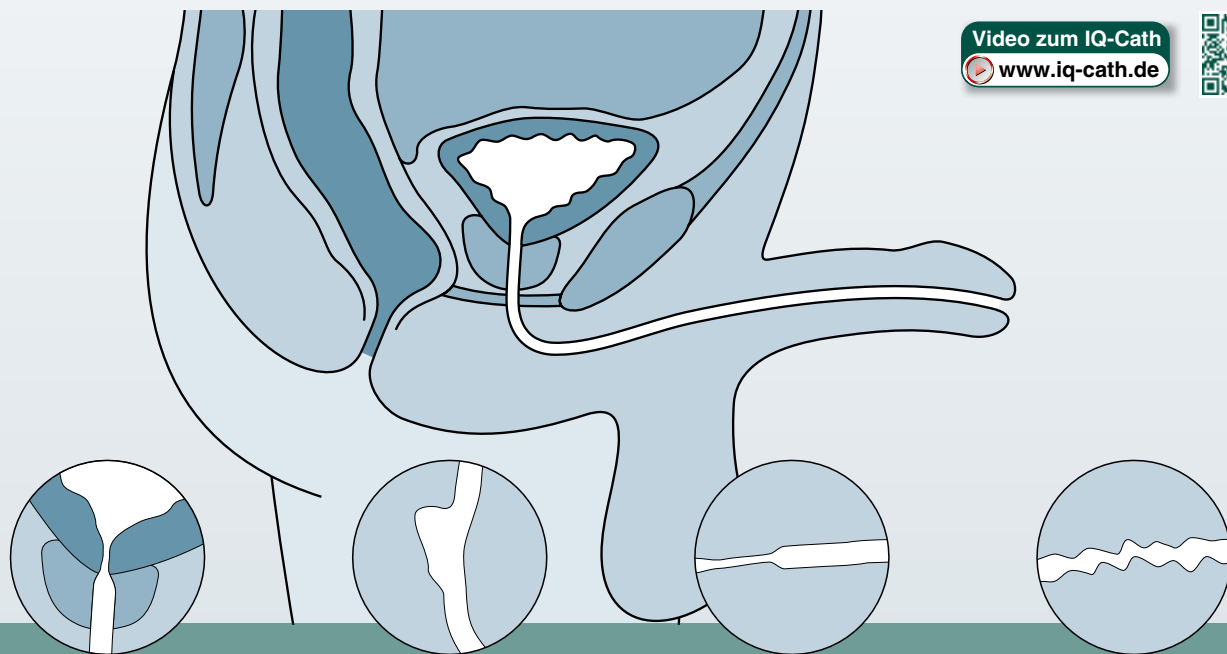

Video zum IQ-Cath  
[www.iq-cath.de](http://www.iq-cath.de)



## O prostata mărită

sau un sfincter spastic face introducerea cateterului în vezică mai dificilă.

## Stricturile și edemele

uretrale împiedică trecerea ușoară a cateterului prin uretră și cresc riscul de rănire.

## Stricturile uretrale

pot face imposibilă utilizarea unui cateter obișnuit (Nelaton sau Tiemann).

## Cicatricile uretrale

după micro-traumatisme determină o trecere mult mai dificilă a cateterului către vezica urinară.

# Design-ul cateterului IQ-Cath

De 4–6 ori pe zi, de 150 de ori pe luna, de 1800 de ori pe an. Aceasta este o estimare aproximativă a numărului de cateterizări pe care o persoană le poate face pentru a evacua conținutul vezicii uri-

nare. De aceea este crucial de utilizat un cateter de foarte înaltă calitate care înglobează mai multe caracteristici destinate a preveni traumele tractului urinar inferior.



## Vârful rotunjit

Vârful siliconic și moale, unic și patentat ghidează cateterul și face imposibilă rănirea uretrei. El are efectul unui dilatator uretral blând.



## Orificii laterale rotunjite și netede

Orificiile laterale sunt rotunjite la interior și la exterior pentru a nu răni în nici un fel țesutul sensibil al mucoasei uretrale.



## Zona flexibilă

Vârful rotunjit și flexibil (atât cât trebuie!) permite parcurgerea uretrei fără forță.

# Versiuni ale cateterelor IQ-Cath

CH    Ø mm    Cod    Cod  
 Fără ambalaj suplimentar    Cu ambalaj dublu

## Cateter IQ-Cath de unică utilizare pentru cateterizare intermitentă – cu teacă hidrofiliă – lungime 43 cm

### IQ-Cath 20 – fără soluție salină pentru activare inclusă • steril




●	10	3,3	IQ 2004.10	IQ 2014.10
○	12	4,0	IQ 2004.12	IQ 2014.12
●	14	4,7	IQ 2004.14	IQ 2014.14
●	16	5,3	IQ 2004.16	IQ 2014.16
●	18	6,0	IQ 2004.18	IQ 2014.18

### IQ-Cath 21 – gata de utilizare • cu soluție salină pentru activare inclusă • steril



●	10	3,3	IQ 2704.10	IQ 2714.10
○	12	4,0	IQ 2704.12	IQ 2714.12
●	14	4,7	IQ 2704.14	IQ 2714.14
●	16	5,3	IQ 2704.16	IQ 2714.16
●	18	6,0	IQ 2704.18	IQ 2714.18

### IQ-Cath 26 – gata de utilizare • cu soluție salină pentru activare inclusă • sac colector de urina atașat (1 litru) • steril

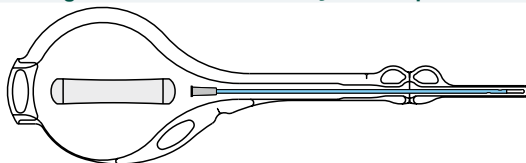

●	10	3,3	–	IQ 2814.10
○	12	4,0	–	IQ 2814.12
●	14	4,7	–	IQ 2814.14
●	16	5,3	–	IQ 2814.16
●	18	6,0	–	IQ 2814.18

## Cateter IQ-Cath de unică utilizare pentru cateterizare intermitentă – cu gel hidrosolubil – lungime 43 cm

### IQ-Cath 30 – fără gel inclus • steril




●	10	3,3	IQ 3004.10	IQ 3014.10
○	12	4,0	IQ 3004.12	IQ 3014.12
●	14	4,7	IQ 3004.14	IQ 3014.14
●	16	5,3	IQ 3004.16	IQ 3014.16
●	18	6,0	IQ 3004.18	IQ 3014.18

### IQ-Cath 31 – gata de utilizare • cu gel inclus (Kissen) • steril



●	10	3,3	IQ 3104.10	IQ 3114.10
○	12	4,0	IQ 3104.12	IQ 3114.12
●	14	4,7	IQ 3104.14	IQ 3114.14
●	16	5,3	IQ 3104.16	IQ 3114.16
●	18	6,0	IQ 3104.18	IQ 3114.18

### IQ-Cath 36 – gata de utilizare • cu gel inclus (Kissen) • sac colector de urină atașat (1 litru) • steril

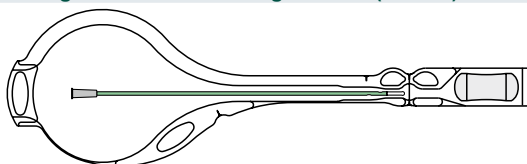

○	12	4,0	IQ 3604.12	IQ 3614.12
●	14	4,7	IQ 3604.14	IQ 3614.14
●	16	5,3	IQ 3604.16	IQ 3614.16
●	18	6,0	IQ 3604.18	IQ 3614.18

Disponibil în cutii a câte 30 de bucăți.



**MANFRED SAUER GMBH**  
 Hersteller von Medizinprodukten

Video zum IQ-Cath  
[www.iq-cath.de](http://www.iq-cath.de)



Lansat în august 2013

SC. EUROMEDICAL DISTRIBUTION GRUP S.R.L. • Str. Culmea Veche Nr. 14, Sector 3 • Cod 030592 Bucharest  
 Tel. ++40 213113461 • Fax ++40 213113463 • Mail: emdgrup@gmail.com • www.euromedical.ro